



電動馬達 OPTIMA

中文名稱："賓埃爾 " 牙科手機及其附件 (未滅菌)
英文名稱："BIEN-AIR" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile)
產品型號：OPTIMA
許可證號：衛部醫器輸壹字第 023323 號
製造廠名稱：Bien-Air Dental SA

馬 達	
型號與類型	MCX-LED；無碳刷，內出水
適合使用於	膺復美學 - 預防牙科治療
可調整轉速	1,000-40,000rpm
是否可調整設定及最大扭矩值	不可設定扭力值；2.5Ncm
是否可以高溫高壓消毒	可以
管線固定方式及活動度	螺紋固定 / 無法轉動
控制主機	
操作介面	類比旋鈕
安裝介面	包含控制電路板與操作主機，獨立安裝在醫師操作台外 (上)
電源供應	100-240 VAC/A7-63Hz；插座供電



- ❶ **Smart Logic™ 控制**
可調節速度

❷ **終生免潤滑滾珠軸承**
免維護設計

❸ **前進 / 倒轉 雙向操作**
提升靈活性與多功能性

❹ **Gold Connect 鍍金觸點**
優異的導電性，強效抗氧化

❺ **LED 燈**
實現最佳照明

❻ **可高溫消毒**
無需額外防護

Micro 系列手機

縮短 30%、減重 23%

Micro 系列組合

氣動式連接器組合

標準電動組合

植牙機 NEW Chiopro 3rd GEN



中文名稱："賓埃爾" 牙科手機及其附件 (未滅菌)
英文名稱："BIEN-AIR" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile)
產品型號：NEW CHIOPRO 3RD
許可證號：衛部醫器輸壹字第 023323 號
製造廠名稱：Bien-Air Dental SA



- 1 直覺式導航**
藉由單一旋鈕，選單導航變得前所未有的簡單。只需轉動旋鈕即可滾動選單，然後點擊即可確認您的選擇。
- 2 絕對精準**
得益於其高精度的電子系統，在控制台上選擇的扭力與您器械輸出端獲得的扭力完全一致。無需進一步校準，就是這麼簡單。
- 3 預設手術程序**
多虧了預設的手術程序，您可以立即執行您的療程。根據患者的臨床數據來決定執行療程所需的步驟數量（3、4 或 5 步）。隨後系統會自動顯示每一步驟的參數。您現在只需專注於治療您的患者，既簡單又可靠。
- 4 Gold Connect 鍍金觸點**
優異的導電性，強效抗氧化
- 5 維護同樣簡單**
單一旋鈕非常容易從主機上拆卸下來進行滅菌。此外，控制面板受到高耐磨玻璃的保護，非常容易清潔。

輕 量 2200g
輕 巧 240x240x102mm (LxWxH)
易 操 作 使用可高溫高壓消毒磁吸旋鈕，以旋轉按壓方式調整設定

扭力輸出 70Ncm | 改良式水泵，最大流量 150ml/min



CA20:1 L 內出水光纖植牙彎機

專利入水孔設計，生理食鹽水管線藏入機身，不影響握持手感，保持手術操作區視野。
適當距離設計的雙燈光纖，有效最大化手術無影區域。



內建電動馬達 Optima int MX2

中文名稱："賓埃爾 " 牙科手機及其附件 (未滅菌)
英文名稱："BIEN-AIR" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile)
產品型號：MX2 int
許可證號：衛部醫器輸壹字第 023323 號
製造廠名稱：Bien-Air Dental SA

功能介紹

OPTIMA INT 及其 MX2 微型馬達能確保對器械的完美控制，精準管理轉速、扭力以及反轉方向。

搭載 Smart Logic（智慧邏輯）技術的 Optima int 和 DMX 控制主機提供了極致的轉速與扭力控制，能夠將 MX2 微型馬達的卓越性能發揮到極致。

憑藉其 Easy-Nav（簡易導航）的設計理念，Optima int 的操作直覺到令人驚嘆，並能適配大多數的牙科診療椅。


如果您想將現有的氣動診療椅升級，邁入電子數位時代，這絕對是您的理想之選。這款控制主機針對所有主要的復形治療（補牙）及牙髓病學（根管治療）操作，提供了預設的程式模式。

作為一套真正的全功能一體化（all-in-one）系統，它讓您的工作變得更簡單：僅需兩支轉速比轉角手機（彎角手機），就足以應對絕大多數的牙科手術。這不僅提升了治療的舒適度，更大幅節省了時間。



MX2 LED 微型馬達

轉速範圍	100 - 40,000rpm
最高扭矩	3.5 Ncm
扭力控制	可以
根管臨床功能	可以
尺寸	ø 21 x 49mm
重量	90 克
光源	LED
高溫高壓蒸汽消毒	可以
管線連接式 / 可旋轉角度	螺旋式 / ±200°

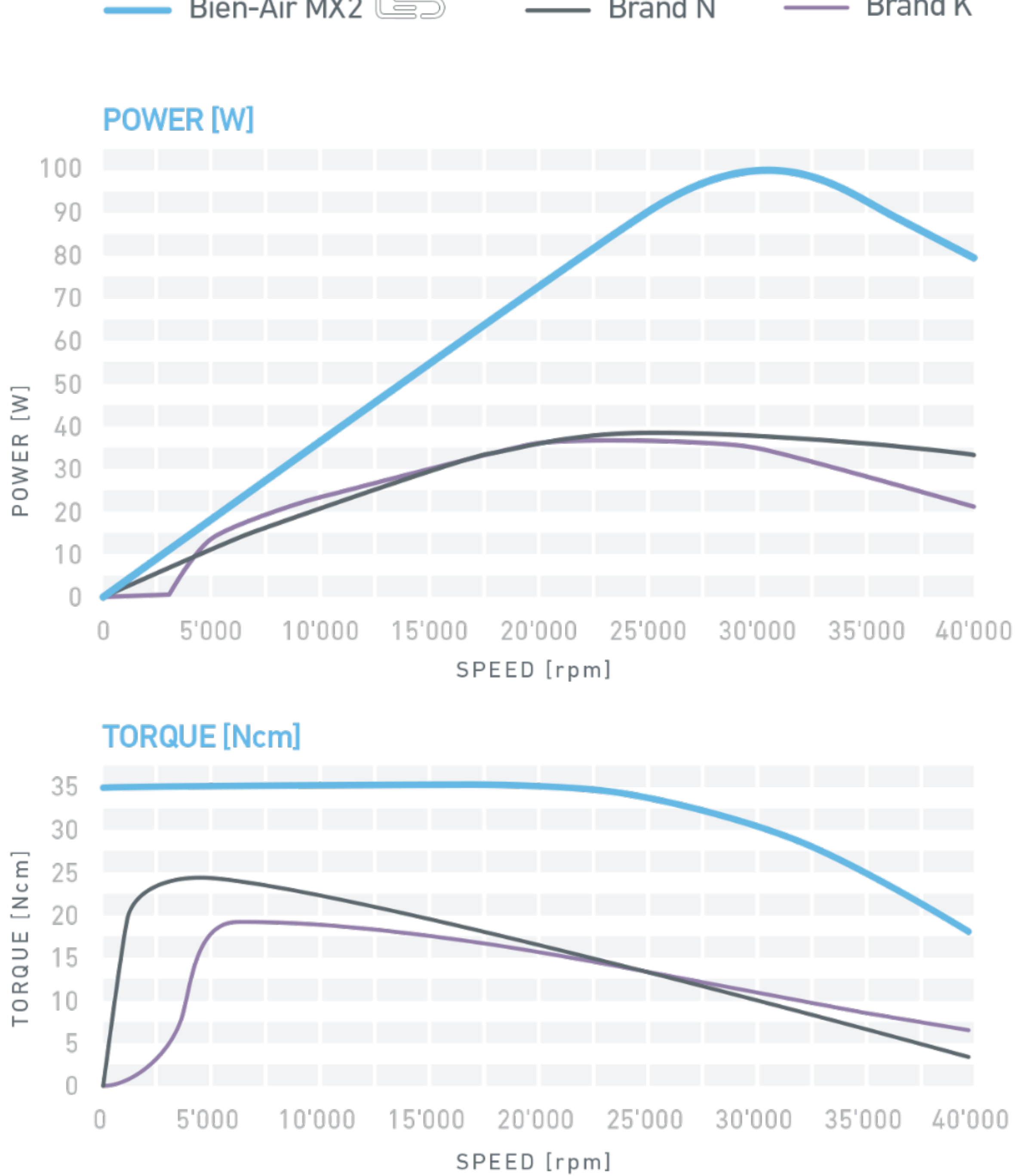



牙科增速彎機 NOVA 1:5

中文名稱："賓埃爾" 牙科手機及其附件 (未滅菌)
英文名稱："BIEN-AIR" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile)
產品型號：NOVA
許可證號：衛部醫器輸壹字第 023323 號
製造廠名稱：Bien-Air Dental SA



NOVA



延長
使用壽命



提高
可靠性



增強
安全性



告別
障礙



降低
交叉污染

NOVA 1:5L 增速手機

精準快速、輕量耐用

NEW CONTRA-ANGLE

NOVA

MORE VISION, BETTER ACCESSIBILITY

SWISS  MADE





手術直彎機

中文名稱："賓埃爾" 牙科手機及其附件 (未滅菌)
英文名稱："BIEN-AIR" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile)
產品型號：PM 1:2 / CA 1:2.5
許可證號：衛部醫器輸壹字第 023323 號
製造廠名稱：Bien-Air Dental SA

PM1:2 功能介紹

安全耐用

除了能對手術區域進行徹底冷卻外，PM 1:2 採用的外置噴水系統 (搭配無菌拋棄式管路) 符合口腔外科最高衛生標準。
結合全新的一次性鑽針防護罩，能有效防止液體滲入手機柄部與馬達，將過熱風險及手機提早損壞的可能性降至最低。

實用且符合人體工學

PM 1:2 優化的直徑與高度設計，提供了幾近無遮擋的口腔內視野，使過程更加精確。

高效可靠

搭配 Bien-Air 屢獲殊榮的微型馬達系列，PM 1:2 能有效縮短手術時間並提升診所的作業效率。


CA1:2.5 功能介紹

由於採用了內置式灌注管，操作簡便，手術區域視野清晰。


連接 MX-i 微型馬達後，可實現完美的平衡性和無與倫比的易用性。

透過多股光學玻璃技術提高光效率。


使用不銹鋼可以確保更高的可靠性，並使其更具耐腐蝕性。

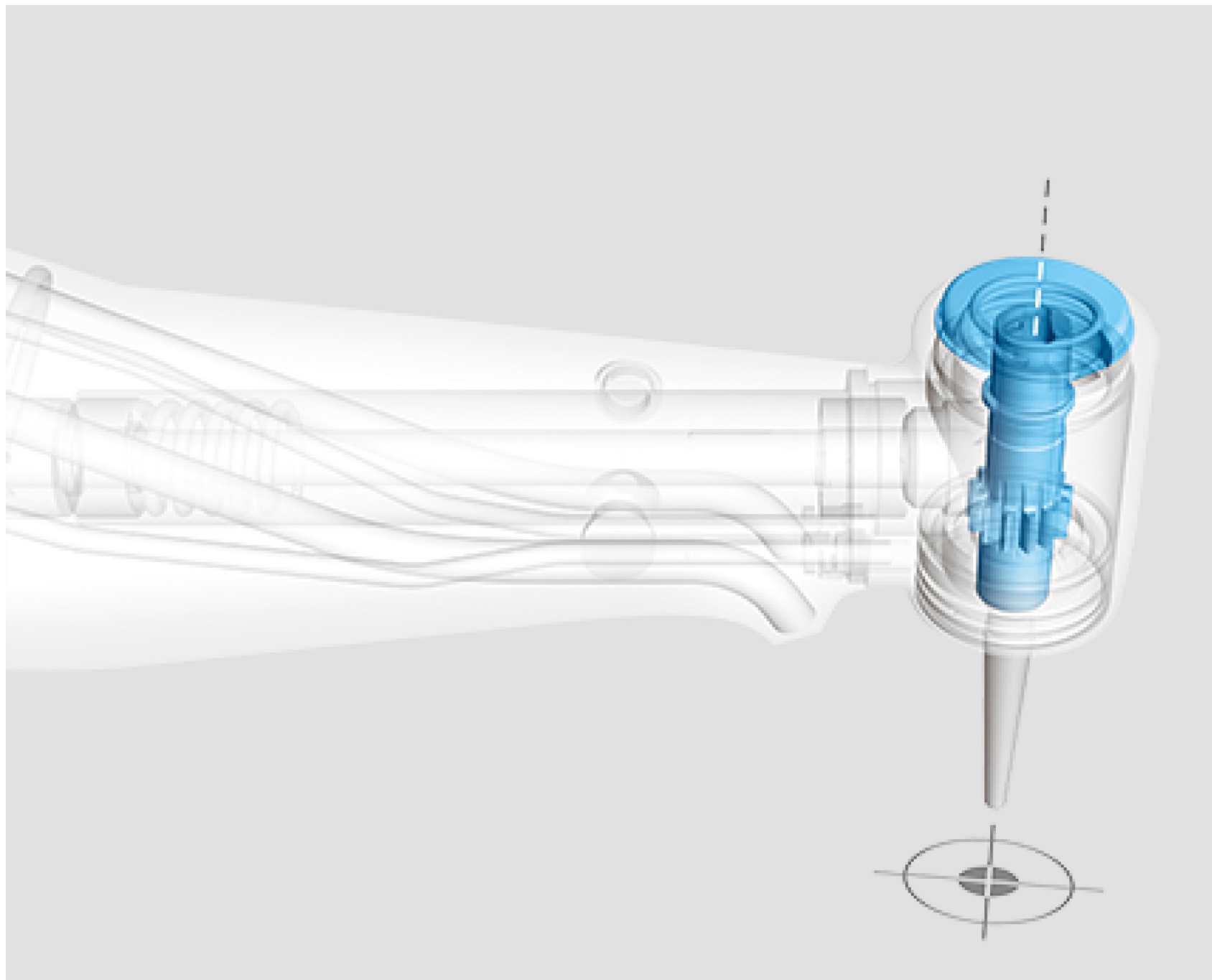


Accu-Chuck™ 車針鎖定與旋轉驅動機構

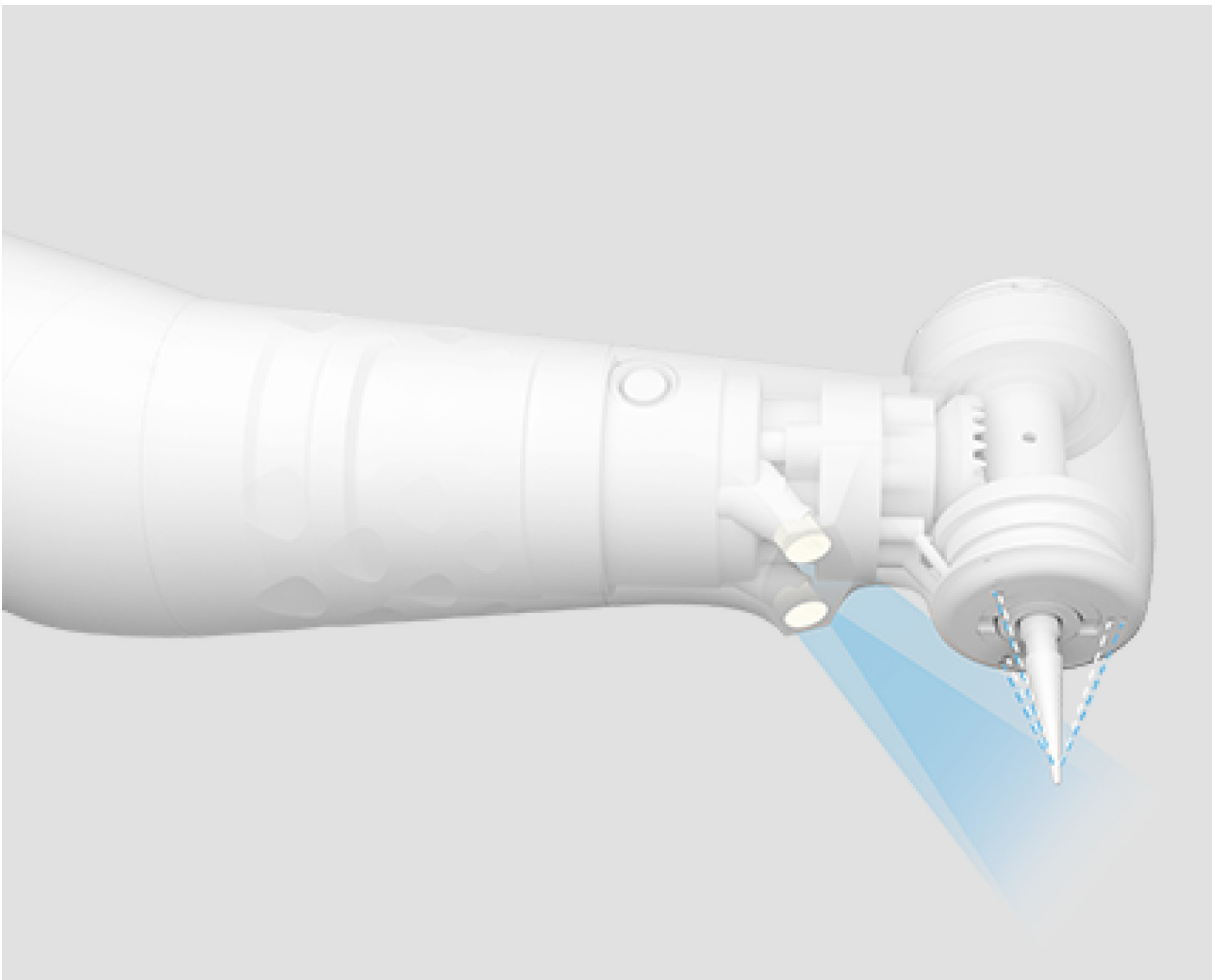

由三個獨立的空氣和水噴霧組成

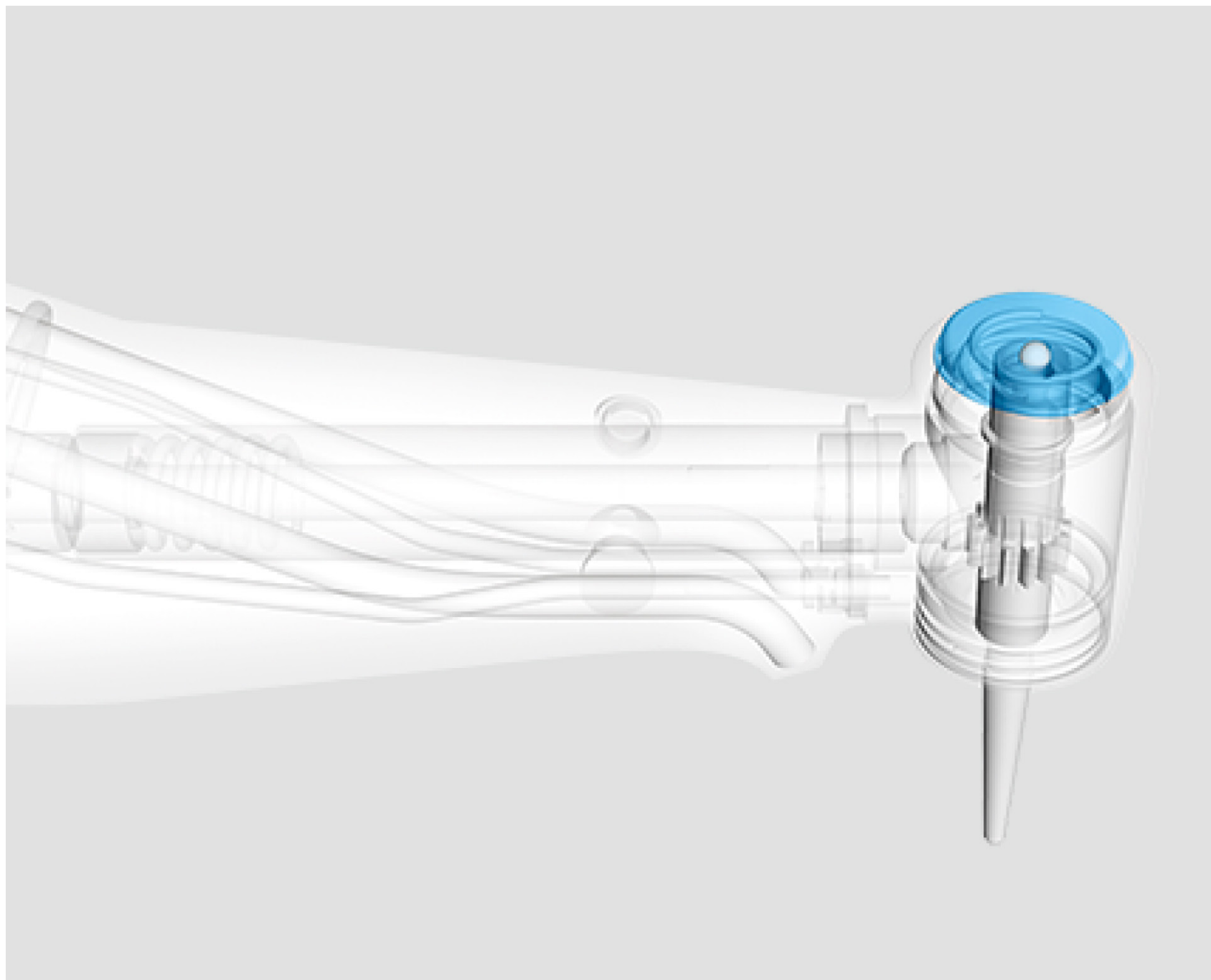

防熱技術整合到頭部的按鈕中

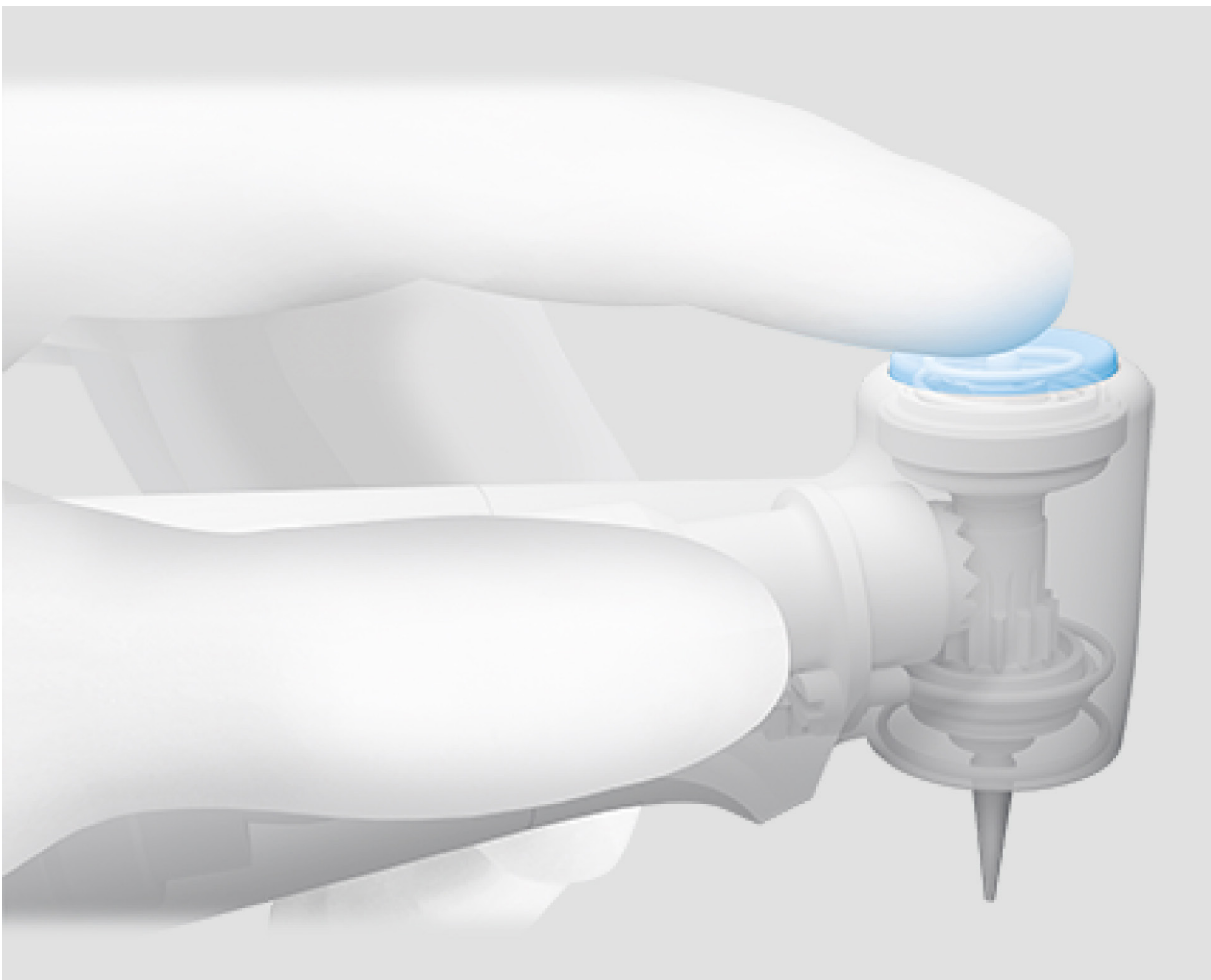

Bien-Air 獨特的按鈕插入鎖定機構



牙科高速手機 TORNADO

中文名稱："賓埃爾 " 牙科手機及其附件 (未滅菌)
英文名稱："BIEN-AIR" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile)
產品型號：Tornado
許可證號：衛部醫器輸壹字第 023323 號
製造廠名稱：Bien-Air Dental SA



TORNADO




TORNADO S



降低工作上的阻礙

具有四個不對稱的空氣 / 水噴霧，這些噴霧以雷射精度匯聚在車針末端，雙 LED 照明強度，可重現日光條件不會產生反射，從而提供工作區域的出色可見度。

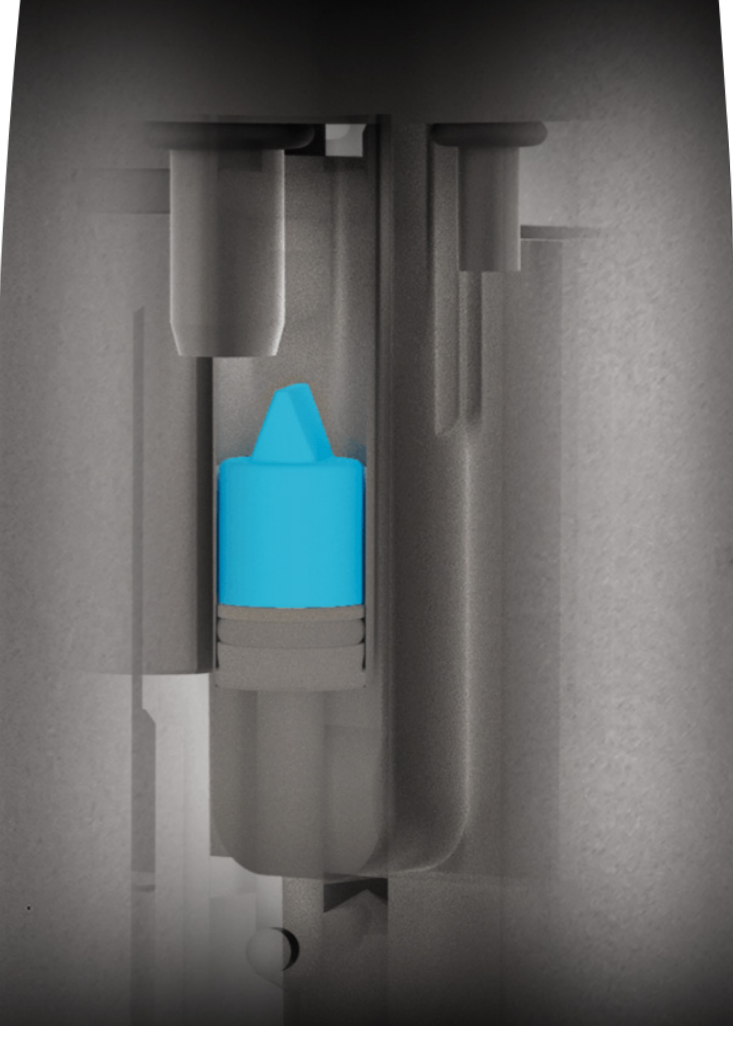

降低交叉感染風險

唯一配備可消毒防回縮閥的手機與唯一包含排氣流防回縮的接頭結合，保護性密封頭機構減少了液體吸入儀器頭的情況。



更安全 隔熱專利

CoolTouch+™ 隔熱技術整合到手機頭的按鈕中，可防止熱能累積並降低患者燒傷的風險。



延長使用壽命

耐磨陶瓷球軸承，減少振動和噪音，同時增加功率可縮短手術時間